BCR-SOFT KRUĶA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA



Saturs

1. Svarīgi
2. Simboli uz etiķetes un instrukcijā
3. Pielietojums
4. Izstrādājuma apraksts
5. Brīdinājumi un drošība
6. Salikšana un lietošana
7. Tehniskie dati
8. Kopšana un apkope
9. Izstrādājuma pārstrāde
10. Izstrādājuma uzglabāšana
11. Kalpošanas laiks

12. Garantija un pēcpārdošanas apkalpošana

13. Veiktās pārbaudes un izmēģinājumi

14. Ražotāja informācija

1. Svarīgi

Pirms izstrādājuma lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju un saglabājiet to turpmākai uzziņai.

Ja nevarat izlasīt vai saprast kādu brīdinājumu, piesardzības norādi vai instrukciju, pirms lietošanas sazinieties ar pārdevēju. Pretējā gadījumā pastāv savainošanās risks.

Pirms lietošanas konsultējieties ar ārstu vai ortopēdijas speciālistu. Viņš ieteiks jums piemērotāko pārvietošanās tehniku.


2. Simboli uz etiķetes un instrukcijā

	Ražotāja informācija
	Ražošanas datums
	Medicīniska ierīce
	Ievērojiet drošības norādes
	Maksimālais lietotāja svars (kg)
	Atbilstības deklarācija
	Uzmanību! Iespiešanas risks
	Izlasiet lietošanas instrukciju
	Informācija par izstrādājuma pārstrādi
	Pārstrādes centrs
SN	Izstrādājuma sērijas numurs
LOT	Izstrādājuma partijas numurs
REF	Izstrādājuma atsauces numurs vai kods

3. Pielietojums

Spieķi un kruķi ir palīglīdzekļi, kas nodrošina atbalstu cilvēkiem ar staigāšanas grūtībām un palīdz pārvietoties.

4. Izstrādājuma apraksts

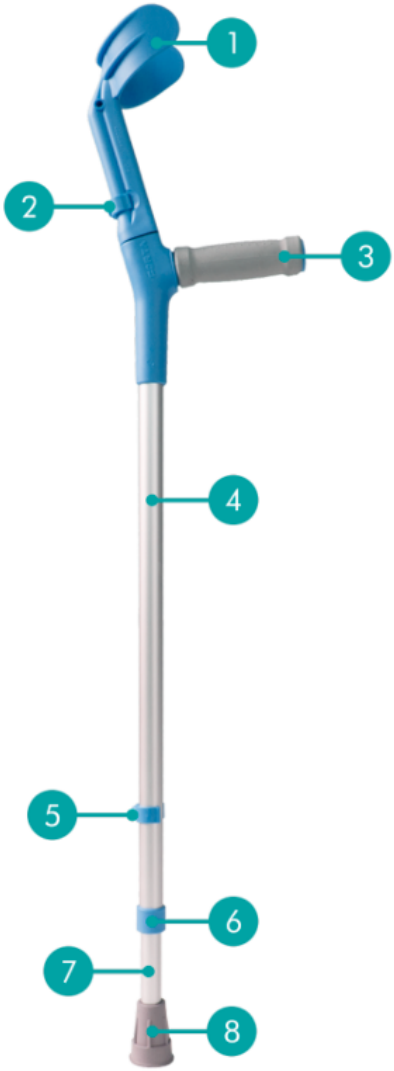


1. Apakšdelma balsts
2. Apakšdelma balsta regulēšanas fiksators
3. Rokturis
4. Fiksētā caurule
5. Caurules regulēšanas fiksators
6. Gumijas fiksators
7. Teleskopiskā caurule
8. Gumijas uzgalis

5. Brīdinājumi un drošība

Šo drošības norāžu neievērošana var izraisīt smagus savainojumus.

- Nepārsniedziet maksimālo svara ierobežojumu - 130 kg.
- Pirms lietošanas pārliecinieties, ka visas detaļas ir droši nostiprinātas un labā darba kārtībā.
- Pārliecinieties, ka visas kustīgās daļas ir nostiprinātas ar regulēšanas fiksatoriem un roktura augstums ir jums piemērots.
- Lietojiet izstrādājumu paredzētajam mērķim. Pārmērīgi nestiepieties un neveiciet bīstamas kustības. Nelietojiet uz slidenām virsmām vai nelīdzena reljefa. Ieteicams lietot tikai uz līdzenas, stingras virsmas.
- Nomainiet gumijas uzgali, ja tas ir nolietots vai bojāts.
- Izmantojiet tikai oriģinālos Forta piederumus un rezerves daļas.
- Neizmantojiet izstrādājumu, lai pārvietotos atmuguriski, pretēji skatiena virzienam.
- Neveiciet regulēšanu vai izmaiņas izstrādājuma lietošanas laikā.
- Nelietojiet uz slapjām, apledojušām vai apsnigušām nogāzēm.
- Ja kāda daļa ir bojāta, salūzusi vai nolietota, sazinieties ar izplatītāju par tās nomaiņu.

6. Salikšana un lietošana

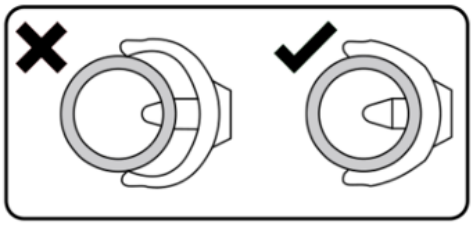

- Lai regulētu augstumu, vispirms izņemiet regulēšanas fiksatoru. Pabīdiet iekšējo cauruli līdz vēlamajam augstumam, savietojot cauruļu atveres. Pēc tam ievietojiet fiksatoru atpakaļ, lai nostiprinātu izvēlēto augstumu.
- Pirms lietošanas pārliecinieties, ka regulēšanas fiksatori ir nostiprināti un pareizi ievietoti, kā parādīts attēlā.
- Kruķis jātur rokā, kas atrodas pretējā pusē savainotajai kājai.
- Noregulējiet kruķa augstumu tā, lai nebūtu jāsaliecas uz priekšu. Pareizs ir tāds augstums, kas ļauj stāvēt pilnīgi taisni.

7. Tehniskie dati

Izmēri, nestspēja un svars norādīti tālāk:

AUGSTUMS LĪDZ ROKTURIM	SVARS	MAKSIMĀLĀ SLODZE
730-975 mm	0,570 kg	130 kg

8. Kopšana un apkope

Ja izstrādājums netiek pienācīgi kopts un uzturēts nevainojamā stāvoklī, pastāv negadījuma risks.

- Regulāri tīriet ar siltu ūdeni un mīkstu drānu. Nelietojiet abrazīvus līdzekļus, mazgāšanas līdzekļus vai šķīdinātājus.
- Noslaukiet ar tīru, mīkstu un sausu drānu.
- Nelietojiet fenolu vai hloru saturošus tīrīšanas līdzekļus, kas var bojāt materiālus.
- Bojājuma gadījumā neveiciet remontu patstāvīgi. Konsultējieties ar pilnvarotu izplatītāju.

9. Izstrādājuma pārstrāde



Kad izstrādājums vairs nav lietojams un ir jāutilizē, sazinieties ar specializēto pārdevēju. Ja vēlaties to pārstrādāt patstāvīgi, konsultējieties ar vietējo atkritumu apsaimniekotāju vai tuvāko pārstrādes centru par utilizāciju.

10. Izstrādājuma uzglabāšana

Nepareiza uzglabāšana var sabojāt izstrādājumu un radīt negadījuma risku.

- Ilgstoši neuzglabājiet izstrādājumu siltuma avota tuvumā vai saulē (piemēram, pie loga vai radiatora), kā arī aukstuma avota tuvumā.
- Sargājiet no liesmām un dzirkstelēm.
- Ievērojiet šādus uzglabāšanas nosacījumus:
  - Glabājiet sausā, vēsā vietā.
  - Aizsargājiet no putekļiem un rūsas, ievietojot iepakojumā vai maisā.
  - Visas noņemtās detaļas un sastāvdaļas glabājiet kopā vienuviet, lai tās nesajauktos ar citām lietām un nepazustu.
  - Nenoslogojiet sastāvdaļas: nenovietojiet smagus priekšmetus uz izstrādājuma vai tā daļām.

11. Kalpošanas laiks

Paredzamais izstrādājuma kalpošanas laiks normālos lietošanas, drošības un apkopes apstākļos ir 1 gads. Pēc tam to var turpināt lietot, kamēr izstrādājums ir nevainojamā lietošanas un apkopes stāvoklī. Dažas detaļas vai sastāvdaļas normāla nolietojuma dēļ var būt jānomaina arī ātrāk.

12. Garantija un pēcpārdošanas apkalpošana

Garantijas noteikumi:
Garantija detaļu un izgatavošanas defektiem attiecas tikai uz oriģināliem Forta izstrādājumiem, kas iegādāti pie pilnvarotiem pārdevējiem.

Konstrukcijai un sastāvdaļām ir 3 gadu garantija no iegādes datuma, ievērojot šādus nosacījumus:

- Garantija detaļu un izgatavošanas defektiem attiecas tikai uz oriģināliem FORTA izstrādājumiem, kas iegādāti pie pilnvarotiem pārdevējiem.
- Tirdzniecības vietai nekavējoties jāziņo par jebkuru izstrādājuma defektu.
- Ražotājs neatbild par defektiem, ko izraisījusi nepareiza apiešanās, nolaidība vai šīs instrukcijas neievērošana.
- Garantijas laikā Forta bez maksas salabos vai nomainīs jebkuru detaļu, kurai konstatēts montāžas vai materiāla defekts.
- Garantija pilnībā zaudē spēku, ja izstrādājums tiek nepareizi pārveidots vai noregulēts vai tam uzstāda attiecīgajam modelim neparedzētas detaļas vai papildaprīkojumu.
- Garantija neattiecas uz rūsu, ko izraisījusi nepareiza lietošana vai nolaidība, kā arī bojājošu šķidrumu vai gāzu iedarbību.

GARANTIJA NESEDZ NEKĀDU AR PĀRVIETOŠANOS SAISTĪTU PROBLĒMU SEKAS, JO ĪPAŠI TRANSPORTĒŠANU, NEGŪTO PEĻŅU, IZDEVUMUS U. C.

Forta NEUZŅEMAS atbildību šādos gadījumos:

- Izstrādājuma normāls nolietojums vai neatbilstoša vai nepareiza lietošana.
- Pircēja vai trešās personas veiktas montāžas vai remonta defekti.
- Nolaidīga apiešanās vai apkope, vai nepiemērotu detaļu lietošana.
- Remonts vai pārveidojumi nepilnvarotās darbnīcās.
- Kaitējums vai zaudējumi lietotājam vai trešajai personai, ko izraisījuši izstrādājuma pārveidojumi vai izmaiņas.
- Garantija neattiecas arī uz pārveidojumiem, kas veikti ar neoriģinālām Forta detaļām.

Garantijas apliecība kopā ar pirkuma rēķina kopiju jānosūta FORTA, S.L. 15 dienu laikā no iegādes datuma. Garantijas apstiprināšanai jāiesniedz apliecība ar izstrādājuma pārdevēja zīmogu. Garantijas apliecību var lejupielādēt šeit:
https://www.fortasl.es/manuals/doc/GARANTIA%20CONTRACTUAL.pdf

13. Veiktās pārbaudes un izmēģinājumi

FORTA izstrādājumi atbilst MDR (ES) 2017/745 IV pielikumam, ir marķēti ar CE zīmi un ir projektēti un pārbaudīti saskaņā ar UNE-EN ISO 11334-1:2007. Forta ir jāapliecina izstrādājumu atbilstība pamatprasībām. Attiecīgais standarts nosaka pārbaudes un testēšanas metodes, ar kurām apliecina šo prasību izpildi. Izstrādājumam piemērotie standarti norādīti tālāk.

Prasību joma	**Piemērojamais standarts**
Ražotāja sniegtā informācija	UNE-EN ISO 20417:2021
Kvalitātes vadības sistēma	UNE-EN ISO 13485:2018
Risku pārvaldība	UNE-EN ISO 14971:2020
Medicīnisko ierīču, kruķu un spieķu testēšana	UNE-EN ISO 21856:2023 UNE-EN ISO 11334-1:2007
Medicīnisko ierīču bioloģiskā novērtēšana	UNE-EN ISO 10993-1:2021
Maksimālā slodze	130 kg

14. Ražotāja informācija

FORTA - FABRICACIONES ORTOPÉDICAS ALBACETE, S.L.
Pq. Emp. Campollano, c/C 90 Nave 1
02007 Albacete
Spānija
info@fortasl.es
www.fortasl.es

CE

RAŻOTS EIROPĀ

FORTA®
FABRICACIONES ORTOPÉDICAS ALBACETE, S.L.